

Vad du ska göra när du vet resultatet?

Om resultatet är positivt (två streck)

Ta kontakt med din barnmorska eller gynekolog, som efter utvärdering av kliniska och laborativa undersökningar, kan bekräfta din graviditet. Vid vissa tillstånd kan testet visa falska positiva resultat. Du får också vidare information och råd angående din graviditet. Se även 'Begränsningar'.

Om resultatet är negativt (ett streck)

Om du har anledning att misstänka att du är gravid (dvs. menstruationen har uteblivit), kan du utföra ett nytt test om några dagar. Är resultatet då fortfarande negativt bör du kontakta barnmorska eller gynekolog. Se även 'Begränsningar'.

Hur fungerar det?

Humant choriongonadotropin (hCG), är ett hormon som kort efter befruktning börjar att produceras av den växande moderkakan, och som utsöndras i urinen. Graviditetstestet innehåller antikroppar som reagerar specifikt med detta hormon. När urinprovet appliceras till en teststicka, gör kapilläraktivitet att provet når testzonen i membranet, och där bildar ett färgat streck. Frånvaro av detta färgade streck kan indikera ett negativt resultat. Som en kontroll, bildas ett färgat streck i kontrollzonen om testet har utförts korrekt.

Viktig information

- 1. Det här testsettet är endast för utvärtes bruk. Får ej sväljas.
- 2. Kastas efter första användningen. Teststickan kan inte användas mer än en gång.
- 3. Använd inte testsettet efter utgångsdatumet har passerats.
- 4. Använd inte testsettet om foliepåsen är skadad eller inte väl förseglad.
- 5. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaring och hållbarhet

- 1. Förvara vid 4°C - 30°C i den förseglade foliepåsen fram till utgångsdatumet.
- 2. Förvaras undan direkt solljus, fukt och hetta.
- 3. FÅR EJ FRYSAS.
- 4. Öppna inte folieförpackningen förrän du är klar att utföra testet.

Begränsningar

- 1. Som med vilket som helst diagnostiskt test, bör en bekräftad graviditetsdiagnos endast ges av medicinskt kunnig personal efter utvärdering av kliniska och laborativa undersökningar.
- 2. Om ett urinprov är för utspätt (dvs. låg specifik gravitation) innehåller det kanske inte en representativ nivå av hCG. Misstänks graviditet

- ändå, bör man vänta 48 timmar innan ett nytt test utförs med ett nytt urinprov.
- 3. Låg koncentration av hCG kan, i mycket tidig graviditet, medföra negativa resultat. I så fall bör ett nytt test utföras efter 48 timmar, där ett nytt urinprov används.
- 4. Förhöjda nivåer av hCG kan orsakas av några få tillstånd förutom vid graviditet. Därför bör man inte använda påvisandet av hCG i urinen som ett sätt att diagnostisera graviditet om inte dessa tillstånd först har eliminerats.
- 5. En normal graviditet kan inte särskiljas från utomkvedshavandeskap baserat på hCG allena. Också spontanaborter kan medföra förvirring vid tolkningen av testresultat.
- 6. Sterilitetsbehandlingar som baseras på hCG kan medföra falska resultat. Hör med din läkare.
- 7. Detta test är för kvalitativ screeninganalys. Det är inte utvecklat för att bestämma kvantitativa koncentrationer av hCG.
- 8. Enheten är endast lämplig för human urintestning.
- 9. Orent urinprov, eller störande ämnen i urinen kan medföra falskt resultat.
- 10. Oren testenhet kan medföra falskt resultat.

Förväntade resultat

Negativa resultat förväntas ses hos friska icke-gravida kvinnor och friska män. Även om tidiga hCG nivåer hos gravida kvinnor kan variera, är det möjligt att med

Babyplan Tidigt Graviditetstest registrera graviditet så tidigt som från den dag menstruationen förväntas. Testet kan användas för att detektera graviditet tidigare, men då med lägre noggrannhet.

Känslighet & noggrannhet

Känslighet:

Babyplan Tidigt Graviditetstest reagerar på hCG om koncentrationen av hCG är 10 mIU/ml eller mer.

Noggrannhet:

Babyplan Tidigt Graviditetstests tillförlitlighet har fastslagits genom laboratorietester med kända mängder av luteniserande hormon (hLH), follikelstimulerande Hormon (hFSH) och sköldkörtelstimulerande hormon (hTSH). Negativa resultat erhöles från alla tester som utfördes med 300 mIU/ml hLH, 300 mIU/ml hFSH och 1 000 µIU/ml hTSH.

Frågor & svar

Det är stor färgskillnad mellan kontrollstrecken på två test. Är detta något jag behöver bry mig om?

Nej. Variationer i kontrollstreckens färg påverkar inte testresultatet.

Kan testresultaten avläsas efter mer än fem minuter?

Nej. Testresultaten måste avläsas inom 5 minuter. Även om ett positivt resultat inte bör förändras på flera dagar, kan ett negativt resultat ändras till ett falskt positivt inom några minuter efter avläsningstidens slut. Det bästa är att alltid avläsa resultatet vid testperiodens 5 minuter, och därefter kasta testet; detta för att undvika förvirring.

En rosa bakgrundsfärg och vågräta streck visades i resultatområdet under testperioden. Är detta något jag behöver bry mig om?

Nej. Varje urinprov kan variera i dess kemiska struktur, och så även den omgivande luftfuktigheten i rummet. Sådana variationer i de fysiska villkoren kan medföra små vågräta streck och/eller rosafärgad bakgrundsfärg, men påverkar inte testresultatet. Så länge kontrollstrecket visas inom fem minuter, så fungerar testet som det ska.

Bibliografi

- 1. Canfield RE, Morgan FJ, Kammerman S, Bell JJ, Agosto GM. Studies of human chorionic gonadotropin. Recent Prog Horm Res. 1971; 27:121-164.
- 2. Ross GT. Clinical relevance of research on the structure of human chorionic gonadotropin. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1977; 129:795.

Förklaring till symboler på förpackningen

-  Skyddas mot solljus
-  Förvaras torrt
-  Förvaras mellan 4°C - 30°C
-  Endast för in-vitro diagnostik
-  Katalognummer
-  Innehåller tillräckligt för <n> tester
-  Importör
-  Kan inte återanvändas
-  Utgångsdatum
-  OBS! Läs bruksanvisningen för korrekt användning
-  Batchkod
-  Försiktighet! Läs bruksanvisningen
-  Europeisk representant

One Step HCG Urine Test
 W1-S 10mIU

 **Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.**
No. 8, Lizhishan Road, Science City
Luogang District
510663 Guangzhou, Kina
Tel: 0086-20-8711-1194
E-mail: sales@wondfo.com.cn

 **Qarad BV**
Cipalstraat 3
2440 Geel
Belgien

 E-Invasion A/S
Artillerivej 86, 1
2300 København S
Danmark
E-mail: info@babyplan.se



När stora drömmar ska gå i uppfyllelse, är det ofta de små sakerna som gör skillnad. Låt Babyplan hjälpa dig med att öka dina möjligheter för att bli gravid.

Babyplan.se

Babyplan®
Tidig
Graviditetstest
Sticka

Bruksanvisning



Version 3.0
SE 18092025
Cat.No. W1-S 10mIU

SE

Babyplan Tidig Graviditetstest är ett snabbt graviditetstest som du själv lätt kan utföra. Testet registrerar förekomsten av humant choriogonadotropin ("hCG") som finns i urinen mycket tidigt under graviditeten. Endast för in-vitro självtestning. Endast för utvärtes bruk.



Har du kommit inåg folsyra?

Så utförs testet

Förpackningens innehåll

- En foliepåse innehållande en reagerande teststicka och en fuktuppsugande påse. Den fuktuppsugande påsen finns med endast i förvaringssyfte, och används inte i testförfarandet.
- Bruksanvisning med instruktioner för användning.

Vad behöver du mer?

- En ren, torr, plast- eller glasbehållare för att uppsamla ett urinprov.
- Tidtagare (klocka eller tidtagarur).

Uppsamling och förberedelse av urinprov

När ska urinprovet uppsamlas?

Vid graviditetstestning kan ett urinprov tas när som helst, men den första morgonurinen är optimal, då den har den högsta koncentrationen av hCG.


Hur ska urinen uppsamlas?

Urinen kan uppsamlas i en vilken som helst ren, torr, plast- eller glasbehållare.



Betyder viktig information

Så utförs testet

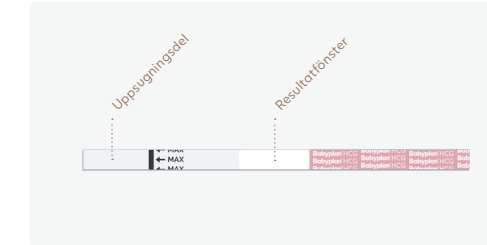

1. Både teststickan och urinen måste ha rumstemperatur innan testet utförs.
2. Ta ut teststickan ur den förseglade foliepåsen.



3. Håll teststickan ned i urinen med pilen pekande ned mot urinen. Ta upp testet efter minst 3 sekunder och lägg stickan plant på en ren, torr och icke-absorberande yta (t.ex. över uppsamlingsbägaren).



Låt inte urinnivån gå över MAX-strecket, då testet annars inte kommer att fungera som det ska.




4. Positiva resultat kan ses så snart som efter 1 minut. För att bekräfta ett negativt resultat bör dock hela reaktionstiden på 3 minuter inväntas.




Avläs inte resultatet efter mer än 5 minuter.

Hur tolkas resultaten?

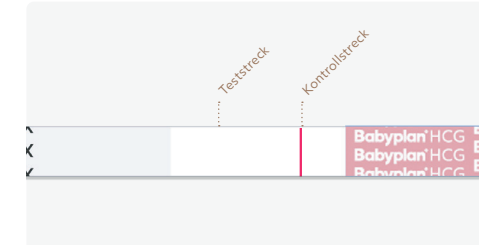


Negativ (inte gravid):

Endast ett färgat streck visas i kontrollzonen. Inget synbart streck visas i testzonen. Detta indikerar att ingen graviditet kunde påvisas.

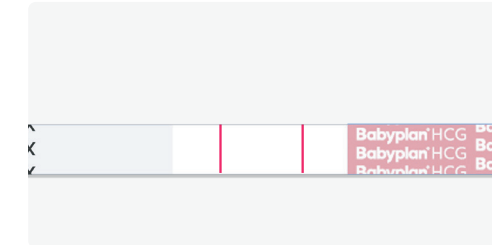

Positiv (gravid):

Tydliga färgade streck visas i kontroll- och testzoner. Det indikerar att du är gravid. Färgintensiteten på strecken kan variera, då koncentrationen av hCG kan skifta i en graviditets olika skeden.

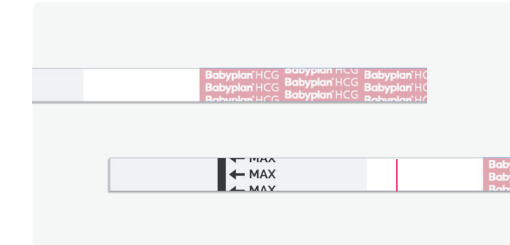

Ogiltig:

Inga synliga streck alls, eller endast ett streck i testzonen men inget i kontrollzonen. Gör om testet med ett nytt testset. Om detta test också misslyckas; kontakta återförsäljaren eller butiken där du köpte produkten och uppge testets LOT nummer.



Om färgen i testzonen är svag, rekommenderas att ett nytt test utförs om 48 timmar.